

The logo for APEX, featuring the word "APEX" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a diagonal slash and a red dot above it. The background of the entire page is a photograph of a large, curved, ribbed structure, possibly a car's roof or a large piece of equipment, with a dark tarp in the foreground. The overall color scheme is teal and blue.

APEX

medeQGroup

Pro-CARE Auto

Pro-CARE Auto

Pro-CARE Auto er et selvinnstillende system som automatisk tilpasser seg de optimale trykkinnstillinger for pasienten. Dette minimerer håndteringen, samtidig som pasientsikkerheten øker. Konstruert med "Cell-on-Cell" teknologi, som betyr økt sikkerhet ved strømbrydd og transport, da den nedre delen av hver luft-celle alltid er fylt med luft og fungerer som en bunnmadrass. Produktet er egnet for bruk i alle typer omsorgsmiljøer, forebygging og behandling av sårkategori 4.



Makstrykk/pleiestilling

Kan anvendes for statisk trykk, pleie- og forflytningsfunksjon. Går automatisk tilbake til trykkavlastende stilling etter 20 min.

Trykkavlastende stilling

Systemet kan stilles inn på vekseltrykkbehandling med en syklus på 10 minutter.

Programvalg (Systemet jobber selvinnstilt/automatisk med valgte program)



Statisk stilling

Gir en stabil overflate med lavere trykk enn det vekslende leie. Egnet til hjelp ved innsovning, går automatisk til trykkavlastende stilling etter 20 minutter.



Sittefunksjon + Vekslende leie

Gir mulighet for økt støtte og stabilitet ved sittende stilling.



Sittefunksjon + Statisk leie

Gir mulighet for økt støtte og stabilitet ved sittende stilling. Går automatisk til trykkavlastende stilling etter 20 minutter



Integrert helavlastning

De fem nederste cellene i madrassen kan individuelt kobles av, avhengig av pasientens lengde, for helt å eliminere trykket på hælene.


Spesifikasjoner

	Modell	Pro-CARE Auto
Pumpe	Størrelse	29,1 x20x11,7 cm
	Vekt	2,2 kg
	Matriale	Brannhemmende ABS
	Spenning	AC 220-240V, 50Hz; AC 120V/ 60Hz
	Intervall/syklus	10 minutter
Trykkavlastnings- Madrass	Størrelse	200 x 80/85/90/105/120 x 20 cm
	Celler	20 x 20 cm høye celler
	Vekt	7-9 kg (avhengig av størrelse/modell)
	Overtrekk	PU / 2-veis stretch
	Cellemateriale	Nylon/TPU
	Brukervekt	0-200 kg



Art.nr	HMS nr	Modell
54-110		Pro-CARE Auto 80 cm
54-111	54 1 51	Pro-CARE Auto 85 cm
54-112	54 1 52	Pro-CARE Auto 90 cm
54-113		Pro-CARE Auto 105 cm
54-114		Pro-CARE Auto 120 cm

Pro-CARE Auto Trykkavlastningsmadrass Pasientt: 176 cm/82 kg

Trykkart 1

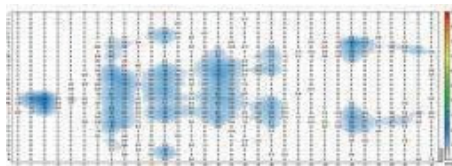

Trykkart 2

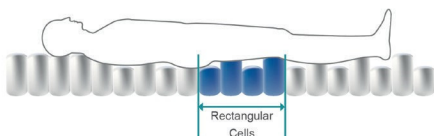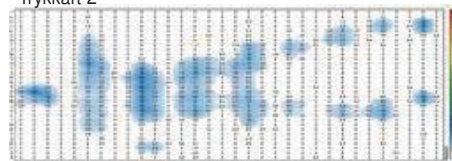

Rektangulære luftceller

De rektangulære cellene følger kroppens konturer, bevegelser og reduserer forskyvningskreftene bedre. Gir bedre støtte sittende.

Pyo-CARE series Therapeutic Support Surface

APEX MEDICAL CORP.

www.apexmedicalcorp.com

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon:

medeQGroup

Karihaugveien 89, 1086 Oslo · +47 97 13 13 68 · post@medeqgroup.no · www.medeqgroup.no